



AÏGO®

APPAREIL MODULAIRE DE VERTICALISATION
GUIDON DE TRANSFERT DÉPLAÇANT



Version : A-2025
Date de Mise à Jour : 01/10/2025

TRANSFERT ASSIS DEBOUT ASSIS

MD

LPPR :
627 19 58
627 19 64

RÉFÉRENCES :

SIGO EVOL / SIGO EVOL ADL /
SIGO EVOL AM / SYGOSSEO /
SYGOSSEO ADL / SYGOSSEO AM

Il permet à un soignant de déplacer en toute sécurité une personne d'une assise à une autre éloignée, en passant par la position debout !



AÏGO® est un guidon de transfert déplaçant équipé d'un monobras englobant réglable en hauteur, d'appuis brachiaux, d'appuis tibiaux inclinables réglables en hauteur et en largeur.

Grâce à son design étudié pour reproduire le mouvement naturel du lever (schéma moteur naturel), il améliore la verticalisation, sollicitant ainsi les capacités de la personne lors du passage en position debout.

Sa large base avec freinage centralisé assure une stabilité optimale lors du lever, rassurant la personne, et facilite le déplacement, préservant ainsi l'aidant d'un effort. Equipé de roulettes, AÏGO® permet de limiter les transferts, en allant aisément de la chambre à la salle de bain sans étape intermédiaire. L'entraxe des roues est optimisée pour s'insérer sous n'importe quel fauteuil roulant.



+ ENTRETIEN DE L'AUTONOMIE

Le cadre englobant et le mât incliné de l'AÏGO® assure une grande stabilité et améliore la verticalisation de l'aidé, participant à la rééducation lors de chaque transfert.
Confort optimal grâce à ses appuis brachiaux.

Il s'adresse à des personnes ayant besoin de passer **d'une assise éloignée à une autre**, ayant des **capacités dans au moins un des deux membres inférieurs sans avoir la capacité de déplacement..**

OPTIONS ET VERSIONS DISPONIBLES



Les sangles

Sangle SANGO®
Réf : SANGO

Fournie avec les réf. :
SIGO EVOL ---



Système ISSEO®
Réf : SYSSSE

Fourni avec les réf. :
SYGOSSEO ---



Appui « demi-lune »
Réf : SYSLUNAPPUI


Fourni avec les réf. :
--- ADL



Appui « monobloc Moustache »
Réf : SYSMOUSTAPPUI

Fourni avec les réf. :
--- AM

Appuis standards

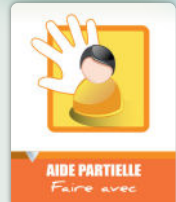



Garantie* : 2 ans hors pièces d'usure (6 mois)
 Fabricant : Alter Eco Santé
 Origine : France (Auvergne Rhône Alpes)
 Classe du dispositif médical : Classe 1



LPPR:
 627 19 58
 627 19 64

Fiche Technique

AÏGO®


APPAREIL MODULAIRE DE VERTICALISATION
 GUIDON DE TRANSFERT DÉPLAÇANT

* Dans le cadre d'une utilisation normale et du respect des préconisations d'entretien du fournisseur

Cette fiche technique présente un résumé des caractéristiques techniques principales (dimensions, références, pièces d'usure, entretien). Elle ne contient pas toutes les informations nécessaires à une utilisation sûre du dispositif. Veillez consulter la notice d'utilisation complète pour les instructions détaillées, les avertissements et précautions de sécurité notamment.

Charge maximale admissible : 150 kg

Aire de giration : 91 cm

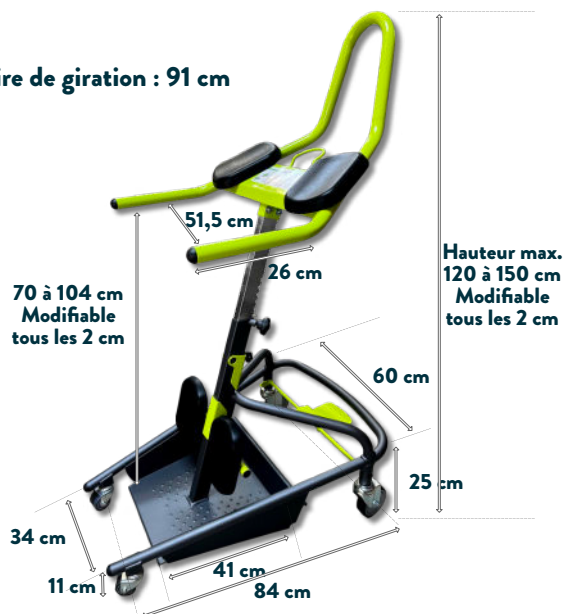

RÉFÉRENCE	N° IDENTIFICATION UDI	Appuis tibiaux	Sangle	POIDS
SIGO EVOL	03760311370304	Appui standard	Sangle SANGO®	23 kg
SIGO EVOL ADL	03760311370298	Appui « demi lune »		24 kg
SIGO EVOL AM	03760311370281	Appui monobloc Moustache		23,1 kg
SYGOSSEO	03760311370182	Appui standard	Système ISSEO®	24 kg
SYGOSSEO ADL	03760311370175	Appui « demi lune »		25 kg
SYGOSSEO AM	03760311370168	Appui monobloc Moustache		24,1 kg

PIÈCES D'USURE

Mousses appuis tibiaux standards et appuis brachiaux (ref : Z90MT), roulettes freinées (ref : ZSIGOR), roulettes non freinées (ref : Z902R).

Seules les pièces d'origines fournies par le fabricant assurent la conformité du produit, le niveau de service et la sécurité exigés par le concepteur.

HYGIÈNE, ENTRETIEN ET STOCKAGE

LES PRODUITS DE NOTRE GAMME SE CONFORMENT AUX PROTOCOLES DE DÉSINFECTION HOSPITALIÈRE.

Protocole de « nettoyage/désinfection et de compatibilité surfaces hautes » mis au point par la Société ANIOS.

Produits prohibés : Solvants, bases, acides, eau de javel et produits abrasifs.

Produit recommandé : Détergent désinfectant surfaces hautes.

Nettoyage possible à l'eau savonneuse sans utiliser de jet sous pression.

Compatible protocoles de bionettoyage et désinfection vapeur selon la norme NF T72-110 pour la désinfection à la vapeur (utilisation D-VAP PRISM).

Stocker dans un endroit propre et ventilé, à l'abri de l'humidité et de fortes variations de température.

Il est recommandé de procéder au nettoyage après chaque utilisation ou entre 2 patients.

COMPOSITION & COULEUR

Acier, peinture epoxy, mousse polyuréthane, PVC, nylon.
 Couleur : Vert anis.



Notice de montage